

FICHA TÉCNICA

Nombre de producto: Lanceta de seguridad BD Sentry™

Referencias del producto: 369528

Uso previsto: La lanceta de seguridad BD Sentry™ es estéril y de un solo uso. Se trata de un dispositivo para la microextracción capilar. El dispositivo incluye un mecanismo de seguridad que provoca la retracción automática del elemento punzante para eliminar cualquier riesgo de pinchazo accidental.

Composición del producto:

Fabricante legal: Becton, Dickinson and Company
Bellver Industrial Estate, Plymouth, Devon, PL6 7BP, UK.

Certificados y estándares: ISO 13485:2003, FM79169

País de origen: Polonia
Organismo notificado: BSI (0086)


Esterilización:

Método: Radiación Gamma
SAL: 10⁻⁶
Estándares aplicados: ISO11137

Conforme:

Directiva Anexo IIa, Directiva 93/42/EEC Dispositivos médicos.

Descripción del producto:

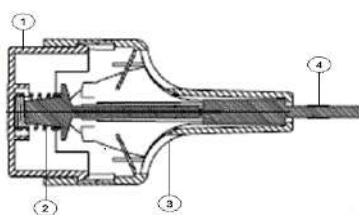

| Componentes | Material |
|-------------------------|------------------------------|
| Botón de activación (1) | Polipropileno (pp) |
| Muelle (2) | Acero zincado (grado sm) |
| Pieza principal (3) | Polipropileno (pp) |
| Aguja (4) | Acero inoxidable (grado 304) |

Vida del producto 5 años

Especificación del producto

| Referencia | Color | Lanceta | Calibre | Profundidad |
|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 369528 | Naranja | Aguja | 28G x 1,5 | 1,5mm |

Etiquetado

El etiquetado cumple con los requisitos de la Directiva Europea 98/79/EC sobre Dispositivos médicos para el diagnóstico In Vitro y posee el marcado CE.


Etiqueta del embalaje

Contiene el número de lote, referencia del producto, símbolo de esterilidad, nombre del producto y pequeña descripción, nombre de fabricante, símbolo de un solo uso, marcado CE, fecha de caducidad, instrucciones gráficas de uso, cantidad y empaquetado y código primario (UCC/EAN 128) y secundario (UCC/EAN 128).

Etiqueta de la caja

Contiene el número de lote, referencia del producto, símbolo de esterilidad, nombre del producto y pequeña descripción, símbolo de un solo uso, fecha de caducidad, marcado CE, fecha de caducidad, código primario (UCC/EAN 128) y secundario (UCC/EAN 128).

Instrucciones de Uso

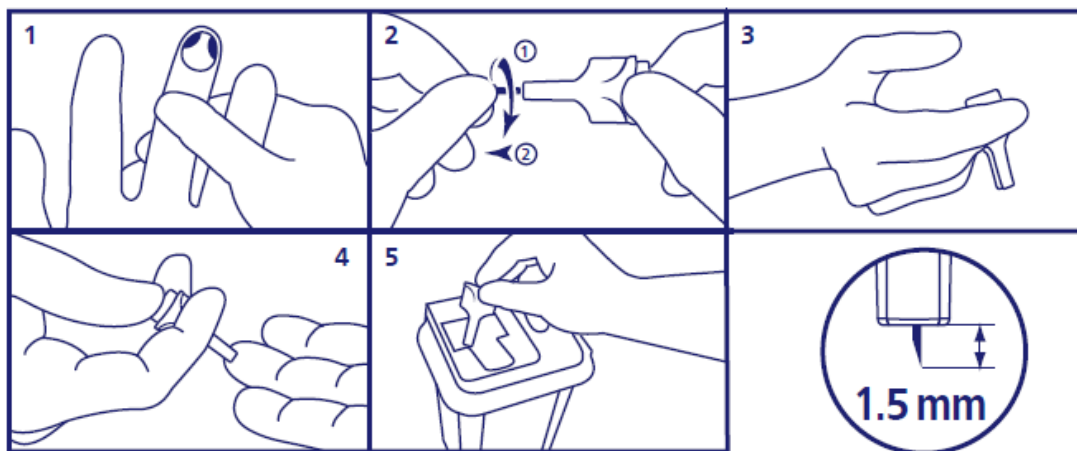

1. Identificar la posición ideal para la punción (área sombreada) y estar seguro de limpiar

2. Retirar el capuchón y desecharlo

3. Sujetar la lanceta firmemente en la zona como se indica en el dibujo.

4. Para activarla, colocar la lanceta sobre el sitio de punción y **presionar** el botón situado en la parte superior de la misma. No retirar el dispositivo de la zona hasta que no se escuche el “clíc”

5. Desechar la lanceta una vez finalizada la extracción en el contenedor de objetos corto punzantes